

Una excelente solución para sus necesidades de conteo y pesaje. Las balanzas portátiles CBX son adecuadas para el uso en su laboratorio, oficina, producción, almacenes e incluso en tareas domésticas. Su brillante pantalla LCD ofrece dígitos de 18 mm de altura así como indicador de batería baja incluido. No es necesario cambiar las pilas, ya que las unidades CBX cuentan con batería interna recargable que puede durar hasta 216 horas antes de necesitar una recarga a través de su puerto USB. Su plato de acero inoxidable de grado 304 (fácil de limpiar) ofrece protección contra la mayoría de los materiales y líquidos. La calibración de modelo CBX garantiza resultados exactos y precisos en todo momento. Este proceso puede ser llevado a cabo por medio de su teclado.



**Las balanzas CBX incluyen batería recargable estándar para una solución de pesaje portátil completa.**



## Características

- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Función de auto apague programable para ahorrar energía
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías necesitan ser recargadas
- Conteo de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Funciona con una entrada USB de bajo voltaje que proporciona flexibilidad para alimentar el dispositivo

## Aplicaciones


- Pesaje
- Reduento de piezas

### Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

## Detalles del Producto

Modelo	CBX 1201	CBX 3001	CBX 6001
Capacidad	1200g	3000g	6000g
Legibilidad	0.1g	0.5g	1g
Repetibilidad (S.D.)	0.2g	1g	2g
Linealidad (+/-)	0.3g	1.5g	3g
Tamaño del Plato	5.8x5.8" / 148x148mm		
Unidades de Medida	g, N, lb, oz		
Calibración	Externa		
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.7" / 18mm 18mm de alto		
Alimentación de Corriente	Batería Interna Recargable / 5VDC 1A adaptador		
Temperatura de Operación	0° a 40°C / 32° a 104°F		
Carcasa	Plástico ABS		
Dimensiones Totales	6.1"x8.9"x2.4" / 155x225x60mm		
Peso Neto	1.3lb / 0.572kg		

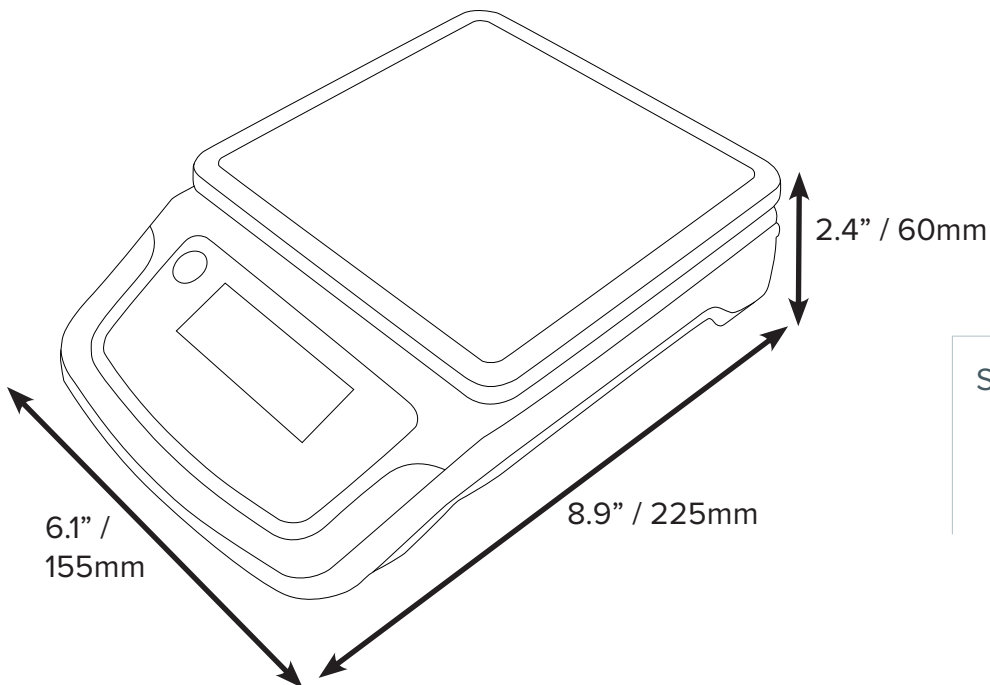

Suministrados por:

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.